

ottobock.

# Wingus

Zuverlässiges und komfortables Design


Quality for life


# Funktionalität trifft auf komfortables Design.



Der Wingus ist ein echter Hingucker. Als heckantriebener Elektrorollstuhl für den Innen- und Außenbereich entwickelt besticht er durch sein reduziertes Design. Sein innovativer selbstfedernder Rahmen sorgt für hohen Komfort beim Fahren auf unwegsamem Terrain.

Die einfache Handhabung, die hohe Servicefreundlichkeit und der hohe Sitzkomfort machen den Wingus zu einem perfekten Elektrorollstuhl im Einstiegssegment. Das alles im minimalistischem Design bei bewährter Ottobock Qualität.

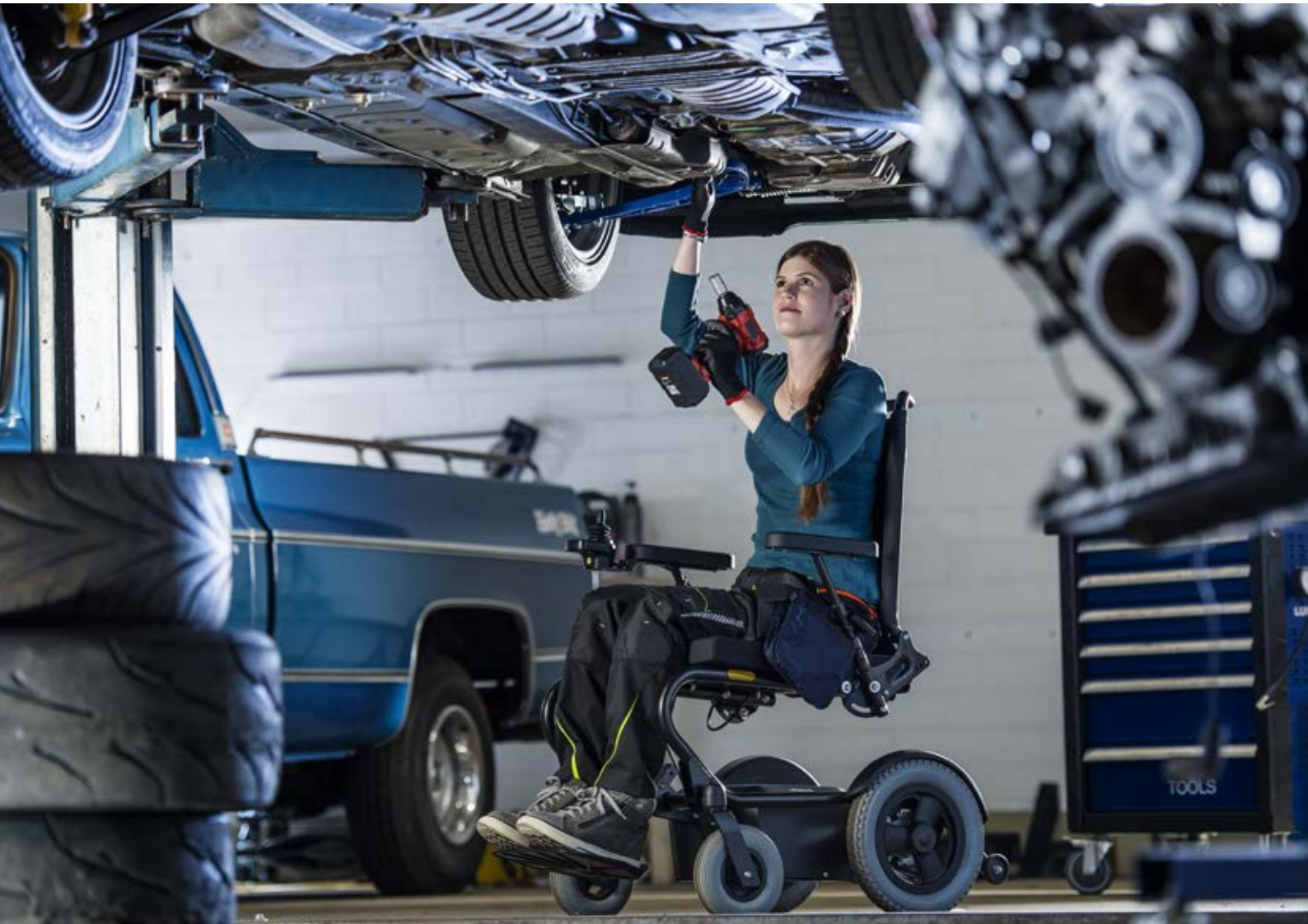


A black and tan dog, possibly a Border Collie, is standing on a grassy path. The dog is looking towards the camera with its tongue out. It is wearing a yellow collar and a black harness. A black leash is attached to the harness. The background features a large body of water, likely a lake or river, with sunlight reflecting off the surface. There are green trees and bushes in the foreground and background, creating a natural setting.

„Mein Rollstuhl sollte  
wendig und robust  
sein, da wir gern in  
der Natur sind.“



## Lisas Geschichte

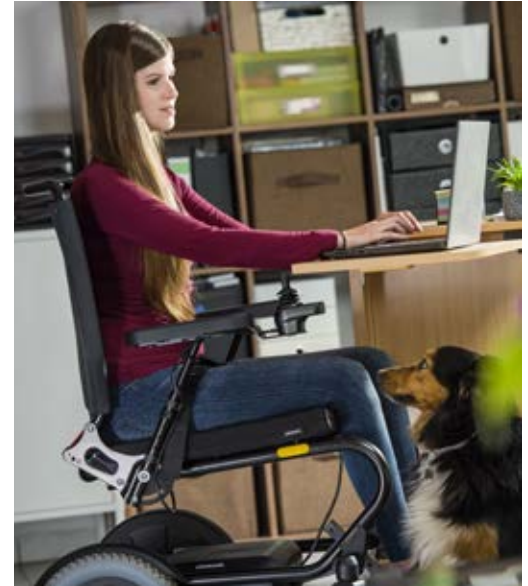

„Driftsport  
ist meine ganz  
große  
Leidenschaft.“



# Jeden Tag optimistisch starten und in vollen Zügen genießen.

## Lisa

mag es gern sportlich. Beim Driftsport kommt sie voll auf ihre Kosten. Mit spektakulären Manövern über den Asphalt zu fahren und das alles bei hohem Tempo, ohne die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren. Geschwindigkeit, Wendigkeit und Eleganz sind die Merkmale, die Lisa auch im Alltag mit ihrem Wingus zu schätzen weiß.

Lisa leidet seit ihrer Geburt an einer seltenen Kombination aus drei Gendefekten, welche die Muskulatur im gesamten Körper betreffen. Es war weltweit keine einzige Person mit dieser Kombination von Gendefekten bekannt. Ihre gesamte Muskulatur ermüdet sehr schnell, und auch Organe wie Magen und Darm arbeiten nur langsam oder eingeschränkt. Sobald sich Lisa überanstrengt, schadet das ihren Muskeln.

„Ich muss akzeptieren, dass ich mehr Zeit für alltägliche Dinge benötige. Auch, dass ich manche Sachen, wie z.B. einen Topf aus dem Schrank zu holen, besser abgebe, da dies sehr schnell meine Kraftreserven schwinden lässt“, sagt Lisa. Das sind die alltäglichen Situationen, die Lisa gerne selbstständig machen möchte, aber nur noch teilweise bewerkstelligen kann. Umso mehr freut es sie, dass ihr der Wingus Spritztouren mit ihrem Hund Luke ermöglicht. In ihrer Heimat – der Vulkaneifel – geht es dann auch mal über robuste und unbefestigte Wege.

Lisa hat ein selbstständiges Kleinunternehmen, in welchem sie ihre externen Dienstleister eigenständig managed. Sie liebt es, ihr Hobby mit ihrem Freund zu teilen,

welche ihr eine große Stütze ist, genau wie ihr Hund Luke. Generell möchte sie so viel wie möglich selbst erledigen und gibt nur ungern Dinge ab. Der Wingus ist der kleine Flitzer und passt daher ideal zu Lisa.

Und wenn sie mit glücklichem Gesichtsausdruck und ausgepowert wieder zu Hause ankommt, dann war das ein perfekter Tag für Lisa.



Für Harald kann der Tag nicht genug Stunden haben. Von früh bis spät ist er dabei aktiv unterwegs. Wenn er morgens aufsteht und durch ein wunderbares Frühstück gut gestärkt in den Tag startet, werden zuerst die Katzen versorgt. Natürlich dürfen auch ein paar Streicheleinheiten nicht fehlen.

Das Leben als Berufssoldat sowie seine Erkrankung an Leukämie hat bei Harald Spuren hinterlassen. Lange Strecken zu Fuß sind nicht mehr ohne Weiteres möglich. Da freut er sich immer, wenn er auf seinem Wingus Platz nehmen kann. Rücken- und Nackenschmerzen, diverse Bandscheibenvorfälle und Kalkschultern beeinflussen seine Aktivitäten im Alltag.





„Gut gelaunt lässt sich jedes Problem einfach lösen.“



**Harald**

liebt seine Tiere, Technik und Kultur. Wenn er mit seiner Frau nicht gerade im Museum unterwegs ist, schraubt er leidenschaftlich an alten Computern. Gerne verliert er dabei auch mal die Zeit aus den Augen. Ob es dann kleine oder große technische Probleme sind, spielt keine Rolle. Solange Harald tüfteln kann und er den Fehler im System findet, ist er glücklich.

Unterstützung bekommt Harald von seiner Frau Hannelore. Gemeinsam erledigen sie die Einkäufe, gehen ins Museum oder genießen den Tag bei einer Pause im Café.

Auch vor technischen Problemen schreckt er nicht zurück. Er untersucht und repariert gerne alles Mögliche, am liebsten aber Computer. „Einige sagen spaßeshalber Nerd zu mir, aber für die meisten bin ich einfach nur der Harald.“



# Wingus Highlights



## **Rückenwinkel**

Der Rückenwinkel lässt sich leicht auf die persönlichen Vorlieben (0°/10°/20°) einstellen.



## **Sitztiefenänderung**

Die Sitztiefe lässt sich problemlos und einfach an die individuellen Bedürfnisse des Anwenders anpassen.



## **Kippschutz**

Auch der integrierte Kippschutz macht die Fahrt mit dem Wingus zu einem sicheren Erlebnis.





#### **Armlehne**

Um zum Beispiel nah an Tische oder andere Gegenstände ranzufahren, klappt man einfach die Armlehne weg.



#### **Fahrkomfort**

Aufgrund des innovativen, selbstfedernden Rahmens bietet der Wingus einen hohen Fahrkomfort.



#### **Nur 57 kg**

Der Wingus besticht mit seiner Leichtigkeit. Mit nur 57 kg Gesamtgewicht ist er ein echtes Fliegengewicht.



Art.-Nr. 490E163=00000

## Wingus

### Zuverlässiges und komfortables Design

Der Wingus ist ein heckangetriebener Sit'n'Drive Elektrorollstuhl, welcher gleichermaßen für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Dieses kompakte und wendige Einstiegsmodell verfügt über eine innovative selbstfedernde Rahmenkonstruktion, welche für hohen Fahrkomfort sorgt. Er kombiniert langzeitgeprüfte Funktionalität mit einem ansprechenden und minimalistischen Design: Verlässlichkeit made in Germany.

#### Optionen

- Parallel wegschwenkbarer Bedienpulthalter
- Elektrische Beleuchtung nach StVZO oder Fußwegebeleuchtung
- Aufbewahrungstasche unterhalb des Sitzbereiches
- Spritzschutz für Antriebsräder
- Gel-Batterien
- Positionierungsgurte für Füße
- Stockhalter
- Halter für Getränke
- Tasche für Mobiltelefon
- Mit hochwertigen Sitzkissen und Kopfstützen aus dem Zubehörsortiment kombinierbar
- Adapter für Kopfstützen-Montageset

#### Technische Daten

Anwendungsklasse	B
Sitzbreite	400–460 mm
Sitztiefe	380/400/420/440/460/480 mm
Vordere Sitzhöhe	500 mm
Gesamtlänge mit hochgeklappter Fußplatte	893 mm
Gesamtlänge mit ausgeklappter Fußplatte	1.050 mm
Gesamtbreite	585 mm
Rückenhöhe	550 mm
Rückenwinkel	0°/10°/20°
Unterschenkellänge mit 50 mm-Sitzkissen (min./max.)	380–480 mm
Reichweite	25 km
Max. Hindernisüberwindung	50 mm
Nenn-Steigfähigkeit	7° (12 %)
Max. Zuladung	120 kg
Gewicht	57 kg

**i** Mit vielen hochwertigen Sitzkissen und Kopfstützen aus dem Zubehörsortiment kombinierbar. Informationen erhalten Sie auf [www.ottobock.de](http://www.ottobock.de) oder direkt von Ihrem Fachhändler.



Parallel wegschwenkbarer Bedienpulthalter



Spritzschutz für Antriebsräder



Gel-Batterien



Elektrische Beleuchtung nach StVZO




Fußwegebeleuchtung




Adapter für Kopfstützen-Montageset



Praktische Aufbewahrungstasche unterm Sitz

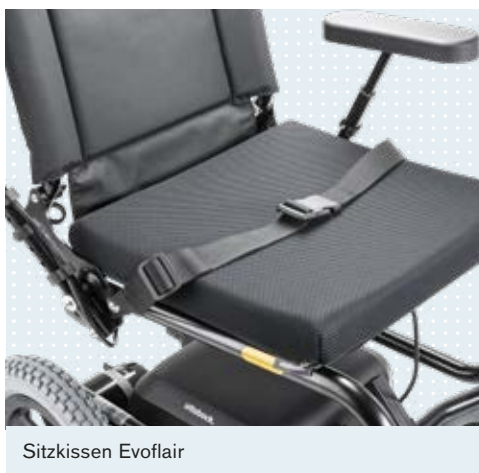

Sitzkissen Evoflair

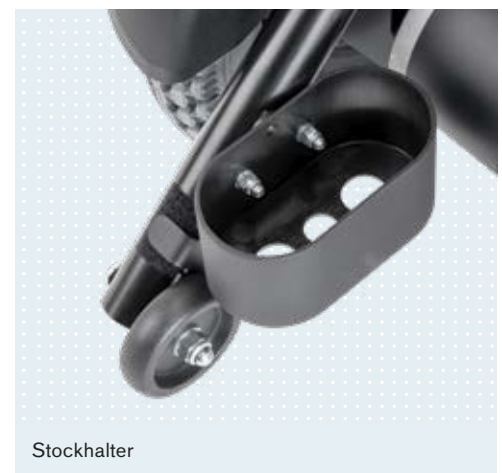

Stockhalter



Halter für Getränke



Tasche für Mobiltelefon



Positionierungsgurte für Füße

# Zuverlässigkeit trifft Design

Der Wingus besticht, nicht nur in seinem klaren Design. Durch seine intelligente und kompakte Bauweise ist er auch für den Innenbereich bestens geeignet. So sind Wendemanöver in engen Räumen für ihn ein leichtes Spiel. Aber nicht nur das: viele weitere Highlights machen den Wingus zu einer außergewöhnlich guten Partie.



## Hoher Fahrkomfort

Das einziartige Rahmendesign des Wingus besticht nicht nur durch die innovative Optik, sondern zeichnet sich durch das selbstfedernde Rahmenkonstrukt durch hohen Fahrkomfort aus. Darüber hinaus ist der langzeitgetestete Rahmen sehr robust bei bewährter Ottobock Qualität.

## Wegklappbare Armlehne

Der Wingus bietet viele Möglichkeiten, um das Heranfahren an Gegenstände zu erleichtern. So lassen sich beispielsweise die Armlehnen nach hinten wegklappen, was zusätzlich auch den Seitentransfer vereinfacht. Darüber hinaus unterstützt die Option des parallel wegschwenkbaren Bedienpulthalters ein nahes Heranfahren an Tische.





## Langzeitgetestete Motoren und Batterien

Die Batterien und Motoren in dem Wingus sind langzeitgetestet und qualitativ hochwertig. So ist der Wingus ein zuverlässiger Partner im Alltag und auf längeren Strecken. Darüber hinaus kann zwischen den Batterien AGM und GEL gewählt werden, wobei sich die GEL-Batterien vor allem für Vielfahrer eignen und sich durch eine längere Lebensdauer auszeichnen.

## Rückenwinkel in drei verschiedene Winkel einstellbar

Auch bei dem Rücken spiegelt der Wingus seine klare Funktionalität wieder. So lässt sich der Rückenwinkel leicht auf die persönlichen Vorlieben der Anwender in den Winkeln 0°, 10° oder 20° einstellen.



## Praktische und stabile Tasche

Die Option der Tasche unterhalb des Sitzbereiches bietet zusätzlichen Stauraum und kann bis zu 3 kg beladen werden. Eine praktische Schlaufe an den Außenseiten der Tasche, sowie integrierte Magnete in der Klappe sorgen für hohe Anwenderfreundlichkeit bei der Nutzung.

