

ottobock.

Wingus

Zuverlässiges und komfortables Design



Quality for life

Funktionalität trifft auf komfortables Design.



Der Wingus ist ein echter Hingucker. Als heckantriebener Elektrorollstuhl für den Innen- und Außenbereich entwickelt besticht er durch sein reduziertes Design. Sein innovativer selbstfedernder Rahmen sorgt für hohen Komfort beim Fahren auf unwegsamem Terrain.

Die einfache Handhabung, die hohe Servicefreundlichkeit und der hohe Sitzkomfort machen den Wingus zu einem perfekten Elektrorollstuhl im Einstiegssegment. Das alles im minimalistischem Design bei bewährter Ottobock Qualität.





A woman with blonde hair and glasses, wearing a dark blue button-down dress and white sneakers, is walking in a city square. The square is filled with rows of empty outdoor cafe chairs with wooden seats and metal frames. In the background, there are multi-story buildings with windows, one of which is a light-colored building with a prominent doorway. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

„Ich genieße gern die
schönen Dinge des
Lebens.“

Für Harald kann der Tag nicht genug Stunden haben. Von früh bis spät ist er dabei aktiv unterwegs. Wenn er morgens aufsteht und durch ein wunderbares Frühstück gut gestärkt in den Tag startet, werden zuerst die Katzen versorgt. Natürlich dürfen auch ein paar Streicheleinheiten nicht fehlen.

Das Leben als Berufssoldat sowie seine Erkrankung an Leukämie hat bei Harald Spuren hinterlassen. Lange Strecken zu Fuß sind nicht mehr ohne Weiteres möglich. Da freut er sich immer, wenn er auf seinem Wingus Platz nehmen kann. Rücken- und Nackenschmerzen, diverse Bandscheibenvorfälle und Kalkschultern beeinflussen seine Aktivitäten im Alltag.



„Gut gelaunt lässt sich jedes Problem einfach lösen.“



Harald

liebt seine Tiere, Technik und Kultur. Wenn er mit seiner Frau nicht gerade im Museum unterwegs ist, schraubt er leidenschaftlich an alten Computern. Gerne verliert er dabei auch mal die Zeit aus den Augen. Ob es dann kleine oder große technische Probleme sind, spielt keine Rolle. Solange Harald tüfteln kann und er den Fehler im System findet, ist er glücklich.

Unterstützung bekommt Harald von seiner Frau Hannelore. Gemeinsam erledigen sie die Einkäufe, gehen ins Museum oder genießen den Tag bei einer Pause im Café.

Auch vor technischen Problemen schreckt er nicht zurück. Er untersucht und repariert gerne alles Mögliche, am liebsten aber Computer. „Einige sagen spaßeshalber Nerd zu mir, aber für die meisten bin ich einfach nur der Harald.“



Wingus Highlights



Rückenwinkel

Der Rückenwinkel lässt sich leicht auf die persönlichen Vorlieben (0°/10°/20°) einstellen.



Sitztiefenänderung

Die Sitztiefe lässt sich problemlos und einfach an die individuellen Bedürfnisse des Anwenders anpassen.



Kippschutz

Auch der integrierte Kippschutz macht die Fahrt mit dem Wingus zu einem sicheren Erlebnis.





Armlehne

Um zum Beispiel nah an Tische oder andere Gegenstände ranzufahren, klappt man einfach die Armlehne weg.



Fahrkomfort

Aufgrund des innovativen, selbstfedernden Rahmens bietet der Wingus einen hohen Fahrkomfort.



Nur 57 kg

Der Wingus besticht mit seiner Leichtigkeit. Mit nur 57 kg Gesamtgewicht ist er ein echtes Fliegengewicht.



Wingus

Zuverlässiges und komfortables Design

Der Wingus ist ein heckangetriebener Sit'n'Drive Elektrorollstuhl, welcher gleichermaßen für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Dieses kompakte und wendige Einstiegsmodell verfügt über eine innovative selbstfedernde Rahmenkonstruktion, welche für hohen Fahrkomfort sorgt. Er kombiniert langzeitgeprüfte Funktionalität mit einem ansprechenden und minimalistischen Design: Verlässlichkeit made in Germany.

Optionen

- Parallel wegschwenkbarer Bedienpulthalter
- Elektrische Beleuchtung nach StVZO oder Fußwegebeleuchtung
- Aufbewahrungstasche unterhalb des Sitzbereiches
- Spritzschutz für Antriebsräder
- Gel-Batterien
- Positionierungsgurte für Füße
- Stockhalter
- Halter für Getränke
- Tasche für Mobiltelefon
- Mit hochwertigen Sitzkissen und Kopfstützen aus dem Zubehörsortiment kombinierbar
- Adapter für Kopfstützen-Montageset

Technische Daten

Anwendungsklasse	B
Sitzbreite	400–460 mm
Sitztiefe	380/400/420/440/460/480 mm
Vordere Sitzhöhe	500 mm
Gesamtlänge mit hochgeklappter Fußplatte	893 mm
mit ausgeklappter Fußplatte	1.050 mm
Gesamtbreite	585 mm
Rückenhöhe	550 mm
Rückenwinkel	0°/10°/20°
Unterschenkellänge mit 50 mm-Sitzkissen (min./max.)	380–480 mm
Reichweite	25 km
Max. Hindernisüberwindung	50 mm
Nenn-Steigfähigkeit	7° (12 %)
Max. Zuladung	120 kg
Gewicht	57 kg



Mit vielen hochwertigen Sitzkissen und Kopfstützen aus dem Zubehörsortiment kombinierbar. Informationen erhalten Sie auf www.ottobock.de oder direkt von Ihrem Fachhändler.



Parallel wegschwenkbarer Bedienpulthalter



Spritzschutz für Antriebsräder



Gel-Batterien



Elektrische Beleuchtung nach StVZO



Fußwegebeleuchtung




Adapter für Kopfstützen-Montageset



Praktische Aufbewahrungstasche unterm Sitz



Sitzkissen Evoflair

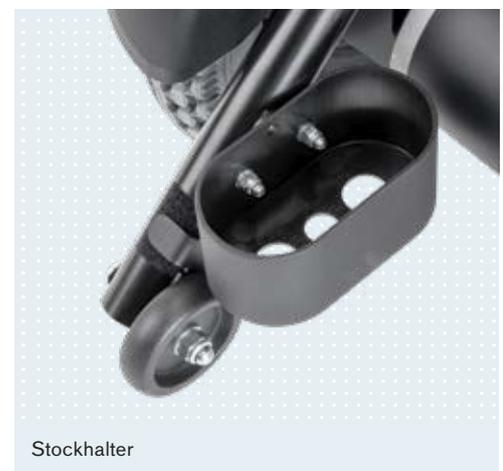

Stockhalter



Halter für Getränke



Tasche für Mobiltelefon



Positionierungsurte für Füße

Zuverlässigkeit trifft Design

Der Wingus besticht, nicht nur in seinem klaren Design. Durch seine intelligente und kompakte Bauweise ist er auch für den Innenbereich bestens geeignet. So sind Wendemanöver in engen Räumen für ihn ein leichtes Spiel. Aber nicht nur das: viele weitere Highlights machen den Wingus zu einer außergewöhnlich guten Partie.



Hoher Fahrkomfort

Das einziartige Rahmendesign des Wingus besticht nicht nur durch die innovative Optik, sondern zeichnet sich durch das selbstfedernde Rahmenkonstrukt durch hohen Fahrkomfort aus. Darüber hinaus ist der langzeitgetestete Rahmen sehr robust bei bewährter Ottobock Qualität.

Wegklappbare Armlehne

Der Wingus bietet viele Möglichkeiten, um das Heranfahren an Gegenstände zu erleichtern. So lassen sich beispielsweise die Armlehnen nach hinten wegklappen, was zusätzlich auch den Seitentransfer vereinfacht. Darüber hinaus unterstützt die Option des parallel wegschwenkbaren Bedienpulthalters ein nahes Heranfahren an Tische.





Langzeitgetestete Motoren und Batterien

Die Batterien und Motoren in dem Wingus sind langzeitgetestet und qualitativ hochwertig. So ist der Wingus ein zuverlässiger Partner im Alltag und auf längeren Strecken. Darüber hinaus kann zwischen den Batterien AGM und GEL gewählt werden, wobei sich die GEL-Batterien vor allem für Vielfahrer eignen und sich durch eine längere Lebensdauer auszeichnen.

Rückenwinkel in drei verschiedene Winkel einstellbar

Auch bei dem Rücken spiegelt der Wingus seine klare Funktionalität wieder. So lässt sich der Rückenwinkel leicht auf die persönlichen Vorlieben der Anwender in den Winkeln 0°, 10° oder 20° einstellen.



Praktische und stabile Tasche

Die Option der Tasche unterhalb des Sitzbereiches bietet zusätzlichen Stauraum und kann bis zu 3 kg beladen werden. Eine praktische Schlaufe an den Außenseiten der Tasche, sowie integrierte Magnete in der Klappe sorgen für hohe Anwenderfreundlichkeit bei der Nutzung.



A hand holding a wicker basket filled with yellow flowers, set against a blurred background of a park with trees and a bench. The scene is bright and sunny, suggesting a pleasant outdoor environment.

Erkundigen Sie sich jetzt
bei Ihrem Fachhandel
oder Sanitätshaus nach
dem Wingus.

