


Bereit für den Alltag. Taleo 1C50

Taleo wurde für aktive Anwender entwickelt, die sich in unterschiedlichsten Innen- und Außenbereichen bewegen und großen Wert auf müheloses Gehen legen, wo auch immer das Leben sie hinführt.

Für bestmögliche Versorgungsergebnisse gemacht:

- Doppelfedern und eine lange Carbonbasisfeder ermöglichen ein geschmeidiges Abrollen und eine effiziente Energierückgabe bei verschiedensten Gehgeschwindigkeiten
- Einzigartige flexible Verbindung der Carbonfedern im Vorfuß für eine optimale Anpassung an unterschiedlichste Terrains
- Individuelle Stoßdämpfung dank drei verschiedener Fersenkeiloptionen
- Wasser- und korrosionsbeständig
- Wasserablaufkonturen am Adapter sowie Öffnungen in der Fußsohle verhindern, dass sich Wasser in der Prothese sammelt
- Schlanker Anschlussadapter eignet sich für Versorgung mit Kosmetik

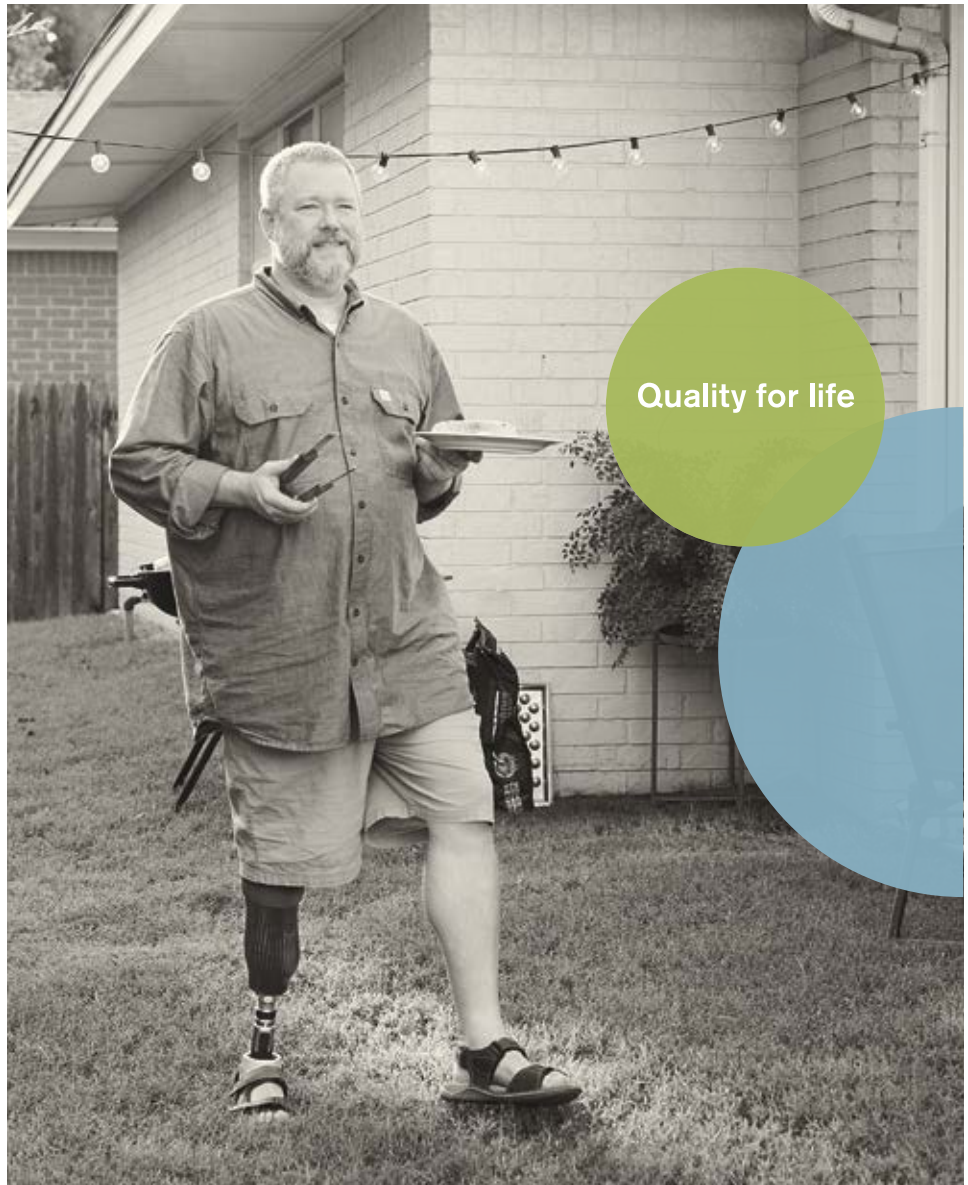

Quality for life



Technische Daten

Mobilitätsgrad	MG 3–4
Max. Körpergewicht	150 kg
Größen	22–30 cm
Fußhülle	Schmale Form mit 15 +/- 5 mm Absatzhöhe (Größe 22–25 cm) Normale Form mit 10 +/- 5 mm Absatzhöhe (Größe 24–30 cm)
Gewicht ohne Fußhülle*	450 g
Gewicht mit normaler Fußhülle*	690 g
Einbauhöhe	150 mm (mit normaler Fußhülle*)

* Referenzgröße ist 26 cm.

Taleo 1C50

Bestellfax +49 5527 848-1414 · prothetik@ottobock.de

Auftraggeber	
Firma	Kunden-Nr.
Straße	PLZ/Ort
Telefon	E-Mail
Com.	
Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)	
Firma	
Straße	PLZ/Ort



Der Lieferumfang beinhaltet das Fußmodul 1C50, die Fußhülle 2C15 inkl. der Anschlusskappe, das Fersenkeil-Set 2F50 (bestehend aus drei verschiedenen Härtegraden) und eine schwarze Spectra-Socke.

Auswahl der Federsteifigkeit in Abhängigkeit zu

1 Körpergewicht und Aktivität sowie

Körpergewicht (kg)	Normale Aktivität	Hohe Aktivität
bis zu 51	1	2
52 – 58	2	3
59 – 67	3	4
68 – 77	4	5
78 – 88	5	6
89 – 100	6	7
101 – 115	7	8
116 – 130	8	9
131 – 150	9	-

Bestellbeispiel: 1C50=R26-4-P/4N

Anzahl	Art.-Nr.	Seite	Größe	Steifigkeit	P /	Farbe	Form
	1C50=				P /		
		Seite	Größe (cm)	Farbe		Form	
		Rechts R	22, 23, ..., 30	Beige 4		Schmal S	
		Links L		Hellbraun 15		22 – 25 cm N	
						24 – 30 cm	

2 Fußgröße

Fußgröße	Steifigkeit								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22						-	-	-	-
23							-	-	-
24							-	-	-
25								-	-
26								**	-
27	-	-						**	**
28	-	-						**	**
29	-	-	-				**	**	**
30	-	-	-				**	**	**

** Kombinieren Sie das Produkt nicht mit einem C-Leg 3C88-3 oder einem C-Leg 3C98-3.

■ Schmale Fußhülle verfügbar (15 ± 5 mm Absatzhöhe)

■ Beide Fußhüllen verfügbar

■ Normale Fußhülle verfügbar (10 ± 5 mm Absatzhöhe)

Ort, Datum Unterschrift

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3411 · F +49 5527 848-1414 · prothetik@ottobock.de · www.ottobock.de

Taleo 1C50

Bestellfax +49 5527 848-1414 · prothetik@ottobock.de

Empfohlene Kombinationen ***

	TF	TT
Schaft	<ul style="list-style-type: none"> • 7T451=1 SiOCX TF Pro • 7T452=2 SiOCX TF Seal + 6Y81 ProSeal Liner 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausstoß-Ventil 4R140 + ProFlex Plus 453A30/40 + Liner Caleo 3D 6Y95 • DVS 4R220 + ProFlex Plus 453A30/40 + DVS Liner 6Y94=*-F • 4R180 Harmony P4 + ProFlex Plus 453A30/40 + Liner Uneo Fresh 6Y512=*-P
Knie	<ul style="list-style-type: none"> • C-Leg 3C88-3/3C98-3 • Genium X3 3B5* • Genium 3B1* 	
Strukturadapter	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserfester Drehadapter 4R57=WR • Quickchange 4R10=111 	<ul style="list-style-type: none"> • Quickchange 4R10=111
Fuß	<ul style="list-style-type: none"> • Taleo 1C50 	
Kosmetik	<ul style="list-style-type: none"> • Funktioneller Formausgleich 3F1=* + 99B120=* 	

*** Alle Komponenten werden einzeln verkauft und sind als Ottobock-Produkte erhältlich, die mit dem Taleo 1C50 Fuß kompatibel sind, was zur Gewährleistung einer optimalen Leistung beiträgt. Orthopädietechniker müssen die Komponenten basierend auf individuellen Patientenkriterien auswählen.