

# Die starke Antwort bei Kniearthrose

## Agilium Line

**Die Orthesen der Agilium Line bilden einen entscheidenden Zusatzbaustein bei der optimalen Versorgung von Patienten mit Kniearthrose.**

Wird eine Arthrose diagnostiziert, beginnt die klassische Therapie oft mit Bandagen und Einlagen, im besten Fall flankiert von einer Umstellung der Ernährung, dem gezielten Muskelaufbau etwa durch Sport und der Physiotherapie. Helfen diese Maßnahmen alleine nicht mehr weiter, bieten Orthesen die Chance auf ein Leben ganz ohne oder mit zumindest deutlich geringerem Einsatz von Schmerzmitteln. Eine Knie-OP kann in vielen Fällen aufgeschoben bzw. sogar verhindert werden. Und auch schwere Arthrosen können deutlich länger ohne Operation behandelt bleiben.



„Studien und Erfahrungen in der Praxis zeigen: Mit Orthesen können wir Operationen bei Gonarthrose verhindern und unseren Patienten mehr Lebensqualität schenken.“

**Dr. Hartmut Stinus**

Präsident der Gesellschaft für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie (2018–2020),  
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

### Vorteile von Knieorthesen

- Wirken biomechanisch
- Entlasten das Gelenk
- Voll reversibel
- Hervorragender Baustein im multimodalen Therapiekonzept
- Erstattung über die Krankenkasse möglich
- Können sehr gut mit einer medikamentösen Therapie kombiniert werden
- Reduzieren den Schmerzmittelbedarf bei schweren Arthrosen nachweislich um bis zu 50%

## So individuell wie Ihre Patienten

### Die Orthesen der Agilium Line



**Agilium Freestep 3.0**  
Der tägliche Begleiter

- Kein Verrutschen am Bein
- Bewegungsfreiheit im Knie
- Einfach anzulegen



**Agilium Reactive**  
Der starke Unterstützer

- Hohe Stabilität bei flachem Design
- Besonders leichtes Eigengewicht
- Jederzeit einfach anpassbar mit dem BOA-Verschluss



**Agilium Softfit**  
Der dezentere Weggefährte

- Innenliegendes "Vector-Grip" Material verhindert Verrutschen
- Dezent unter der Kleidung tragbar
- Atmungsaktives Material für den Einsatz im Alltag oder beim Sport



**Agilium Patella**  
Der dynamische Motivator

- Dynamische Führung der Kniescheibe
- Weiche Polsterung im Bereich der Kniescheibenführung
- Dezent unter der Kleidung tragbar

**Erhalten Sie weiterführende Details zu Kniearthrose und zur Agilium Line in den Broschüren:**

- Information für Ärzte: 646D1229
- Information für den Fachhandel: 646D1740
- Patientenmagazin: 646H48




# Agilium Freestep 3.0

## Der tägliche Begleiter

### Überraschende Form – überzeugende Funktion

Die Agilium Freestep 3.0 sitzt am Fuß und wirkt am Knie. So werden die Kräfte umverteilt, die auf das Gelenk wirken. Sie nimmt die Last aus dem betroffenen Gelenkbereich und lenkt sie in Richtung Kniemitte. Die Bewegungsfreiheit im Knie wird dabei nicht eingeschränkt.

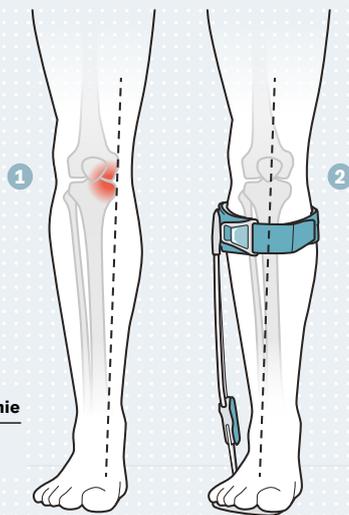

#### Belastungslinie am Knie

- 1 ohne Orthese
- 2 mit Orthese

### Die dritte Generation – Was ist neu?

#### Größen

Neue XS Größe und vereinfachte Größenauswahl

#### Schnellverschluss

Einfaches Anlegen dank neuem Schnellverschluss

#### Varus/Valgus Schraube

Schnelle, stufenlose Anpassung der Varus- und Valguseinstellung

#### Fußbügel

Problemlos an Patienten anpassbar

#### Zuschneidbare Sohle

Einfach und schnell mit einer Schere individuell an Patienten anpassbar



### Nachweislich wirksam und verlässlich

- Indikation mediale oder laterale Kniearthrose, Knieschwellungen
- Kniefreie Versorgung für Patienten mit schmaler, normaler und voluminöser, V-förmiger Beinform
- Wirkprinzip biomechanisch geprüft und klinisch getestet
- Kein Verrutschen am Bein
- Einfach anzuziehen
- Für Patienten, die viel sitzen und/oder sich viel bewegen
- Geeignet auch für sportliche Aktivitäten

### Größentabelle

<b>Artikelnummer</b>	<b>50K4=3</b>				
<b>Seite</b>	<b>L/R</b>				
<b>Größe</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
Höhe A (mm)	53 – 62	63 – 72	73 – 82	83 – 92	93 – 103
<b>Indikation</b>	<b>LG</b> = laterale Gonarthrose, Valgusversion = mediale Gonarthrose, Varusversion				

A = Außengelenkhöhe, L = links, R = rechts

### Bestellbeispiel

<b>Bestellnummer</b>	<b>50K4=3-R-M*</b>	<b>50K4=3-R-M-LG*</b>
		
<b>Seite</b>	<b>R</b>	<b>R</b>
<b>Größe</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Indikation</b>		<b>LG</b>

\*Artikelnummer, Seite, Größe, Indikation.

Sie möchten mehr über Agilium Freestep 3.0 erfahren? Dann besuchen Sie uns online: [www.ottobock.de](http://www.ottobock.de)  
Zusätzliches Videomaterial finden Sie auf: [youtube.com/ottobock](https://youtube.com/ottobock)



„Die neue Agilium Freestep 3.0 wird ganz elegant mit nur einer Schraube am Patientenbein eingestellt.“

**Heiko Drewitz**  
Orthopädietechnikermeister